


Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-do-ran-gelpi-retraktor-wybor-rozmiarow-9cm-11cm-13cm-p-569.html>

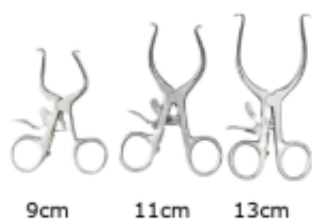

Rozwieracz do ran GELPI, retraktor - (wybór rozmiarów: 9cm, 11cm, 13cm)

Cena brutto

46,44 zł

Cena netto

43,00 zł

Opis produktu

☐☐ Rozwieracz do ran GELPI

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz do ran do ran GELPI, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Rozwieracz do ran typu **GELPI** to narzędzie chirurgiczne stosowane do precyzyjnego rozwierania tkanek w zabiegach chirurgicznych i weterynaryjnych.

Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, zapewnia **długą żywotność**, odporność na korozję oraz możliwość sterylizacji w autoklawie.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐ Cecha

☐☐ Opis

☐☐ **Długość:** 9cm, 11cm, 13cm

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

⚙️ **Sterylizacja:** Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

☐☐ **Typ narzędzia:** Rozwieracz do ran GELPI

☐☐ **Konstrukcja:** Precyzyjna, ergonomiczna, wytrzymała

☐☐ **Stan produktu:** Nowy

☐☐ Najważniejsze cechy

☐ Cechy

☐☐ Opis

☐☐ **Stal nierdzewna premium:** Odporność na korozję i trwałość

☐ **Idealna długość:** Precyzyjne rozwieranie tkanek

⚙ **Możliwość sterylizacji:** Autoklaw lub dezynfekcja chemiczna

☐ **Ergonomiczna budowa:** Łatwe i pewne trzymanie

☐ **Zastosowanie medyczne:** Chirurgia, weterynaria, zabiegi specjalistyczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 11cm , 13cm , 9cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

