

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kateter-igla-do-odsysania-przemywania-prosta-p-126.html>



Kateter, igła do odsysania - przemywania, prosta

Cena brutto **25,81 zł**

Cena netto **23,90 zł**

Opis produktu

Igła, kateter do odsysania-przemywania, prosta

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu igłę do odsysania prostą z kulką, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Igła – kateter do odsysania i przemywania z kulką to specjalistyczny wyrób medyczny zaprojektowany do precyzyjnych procedur wymagających kontroli przepływu płynów. Dzięki prostej konstrukcji oraz zastosowaniu kulki na końcu, produkt zapewnia większe bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko uszkodzenia tkanek podczas użytkowania.

Wyrób został wykonany z materiałów odpowiednich do zastosowań medycznych, co zapewnia kompatybilność z procedurami klinicznymi oraz łatwość utrzymania odpowiednich standardów higienicznych.

Najważniejsze zalety

- ✓ Precyzyjna średnica umożliwiająca kontrolowaną pracę
- ✓ Konstrukcja z kulką zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania
- ✓ Prosty kształt ułatwiający manewrowanie
- ✓ Przeznaczony do odsysania i przemywania
- ✓ Produkt spełniający wymagania dla wyrobów medycznych

Specyfikacja techniczna

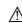
- Średnica: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm.
- Kształt: prosty
- Końcówka: z kulką
- Przeznaczenie: odsysanie i przemywanie
- Klasyfikacja: wyrób medyczny
- Materiał: zgodny z wymaganiami dla wyrobów medycznych

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do stosowania w procedurach medycznych wymagających odsysania lub przemywania. Może być wykorzystywany w placówkach ochrony zdrowia przez wykwalifikowany personel medyczny, zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ✓ Produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny
- ✓ Spełnia obowiązujące normy i wymagania prawne dla wyrobów medycznych
- ⚠ Do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel

-
-  Używać zgodnie z instrukcją producenta

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: Ø1.0mm , Ø1.2mm , Ø1.4mm , Ø1.6mm , Ø1.8mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl